


製品情報

見本

製品コード： 2-BP-001 (旧: 10501)
製品名： 抗BSAポリクローナル抗体
Lot No.： XXXXXXXXXX
免疫動物： ウサギ
免疫原： ウシ血清アルブミン (Bovine serum albumin)
精製： Protein Aにて精製されたウサギIgG
性状： PBS (Proclin™ 950添加) で調整された抗体を凍結乾燥
容量： 0.1 mg
調製： 精製水 50 µLで溶解すると抗体濃度 2 mg/mLとなる。
保存： 溶解後、4℃で2週間。
長期保存する場合は、等量のグリセロールを加えて、-20℃で保存。
注意： 本品は研究用試薬です。ヒトへの使用はできません。
取り扱い際は、白衣、防護眼鏡、マスクを使用してください。

使用例： Western Blotting

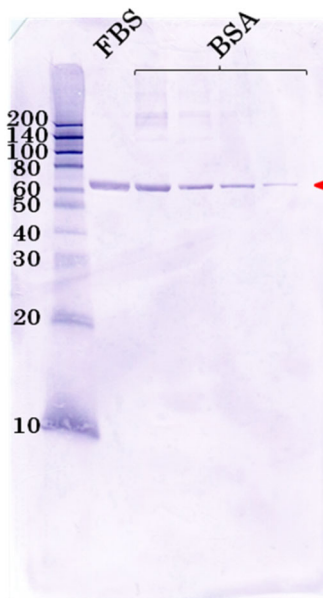

推奨使用抗体濃度： 0.5～1 µg/mL

サンプル： FBS, BSA (0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 µg/lane)

- ① BSAを含まないブロッキング剤でメンブレンをブロッキング。
室温1時間インキュベーション。
- ② ブロッキング剤を含む希釈液で1 µg/mLに調整した抗体を使用。
室温1時間インキュベーション。
- ③ 希釈液で調整したアルカリフォスファターゼ標識抗ウサギ
IgG抗体を使用。室温1時間インキュベーション。
- ④ BCIP/NBTで検出。
BSAに一致する分子量の位置にバンドが検出される。

ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所
東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル
Tel : 03-3526-2031 Fax : 03-3526-2032

発行責任者： 所長 XXXXX

品質保証担当者： 品質保証課 XXXXX

*1 製品に添付する際には、社判、責任者印、品質保証課担当者印が押印されます。

発行日： XXXX年 XX月 XX日

PRODUCT INFORMATION

SAMPLE

Product code: 2-BP-001 (Former code: 10501)

Product name: Rabbit Anti-BSA Polyclonal Antibody

Lot No.: XXXXXXXXX

Source: Rabbit

Immunogen: Bovine serum albumin

Purification: Rabbit IgG purified with protein A.

Appearance: Lyophilized antibody conditioned in PBS with Proclin™ 950.


Volume: 0.1 mg

Preparation: Dissolving contents of tube in 50 µL of distilled water yields an antibody concentration of 2 mg/mL.

Storage: Within 2 weeks at 4°C after dissolution.
For long-term storage, add an equal amount of glycerol and store at -20°C.

Note: This product should be used for research use only. Cannot be used for treatment and diagnosis purposes.
When handling it, wear a lab coat, protective glasses, a mask and gloves.

Example of use: Western Blotting

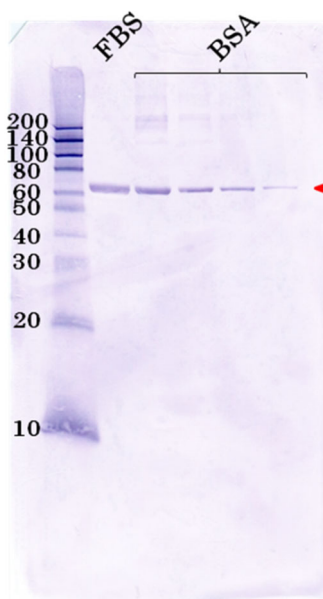

Recommended antibody concentration: 0.5-1 µg/mL

Sample: FBS, BSA (0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 µg/lane)

- 1) Block the membrane with a blocking agent without BSA.
Incubate for 1 hour at room temperature.
- 2) Use the antibody adjusted to 1 µg/mL in diluent containing blocking agent.
Incubate for 1 hour at room temperature.
- 3) Use alkaline phosphatase-conjugated anti-rabbit IgG antibody adjusted with diluent. Incubate for 1 hour at room temperature.
- 4) A band is detected with BCIP/NBT at the position of molecular weight that matches BSA.

Institute of Tokyo Environmental Allergy
Hakusan NT Building, 1-33-18 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
Tel: +81-3-3526-2031 Fax: +81-3-3526-2032

ITEA Director: XXXXX

Quality Assurance: _____ XXXXX

Date of issue: mm dd, yyyy