


製品情報

見本

製品コード： 2-BP-002 (旧: 10502)
製品名： ビオチン標識抗BSAポリクローナル抗体
Lot No.： XXXXXXXXXX
免疫動物： ウサギ
免疫原： ウシ血清アルブミン (Bovine serum albumin)
精製： Protein Aにて精製されたウサギIgG
性状： PBS (Proclin™ 950添加) で調整されたビオチン標識抗体を凍結乾燥
容量： 0.1 mg
調製： 精製水 200 µLで溶解すると抗体濃度 500 µg/mLとなる。
保存： 溶解後、4℃で2週間。
長期保存する場合は、等量のグリセロールを加えて、-20℃で保存。
注意： 本品は研究用試薬です。ヒトへの使用はできません。
取り扱い際は、白衣、防護眼鏡、マスクを使用してください。

使用例： Western Blotting

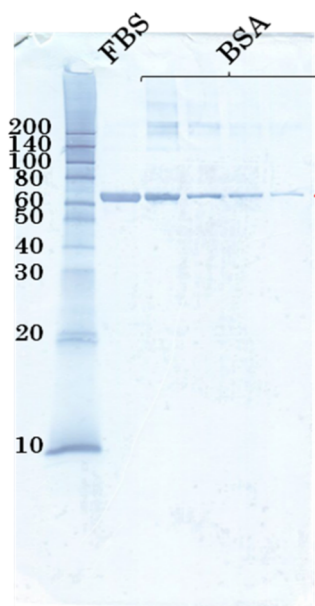

推奨使用抗体濃度： 0.5～1 µg/mL

サンプル： FBS, BSA (0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 µg/lane)

- ① 10%ウサギ血清添加PBSでメンブレンをブロッキング。
室温1時間インキュベーション。
- ② 0.05%Tween20添加10%ウサギ血清添加PBSで1 µg/mLに調整した
本抗体を使用。室温1時間インキュベーション。
- ③ ストレプトアビジン-ペルオキシダーゼを使用。
室温1時間インキュベーション。
- ④ TMBで検出。
BSAに一致する分子量の位置にバンドが検出される。

ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所
東京都文京区白山1-33-18 白山NTビル
Tel：03-3526-2031 Fax：03-3526-2032

発行責任者： 所長 XXXXX

品質保証担当者： 品質保証課 XXXXX

*1 製品に添付する際には、社判、責任者印、品質保証課担当者印が押印されます。

発行日： XXXX年 XX月 XX日

PRODUCT INFORMATION

SAMPLE

Product code: 2-BP-002 (Former code: 10502)

Product name: Biotinylated Rabbit Anti-BSA Polyclonal Antibody

Lot No.: XXXXXXXXX

Source: Rabbit

Immunogen: Bovine serum albumin

Purification: Rabbit IgG purified with protein A.

Appearance: Lyophilized biotin-labeled antibody conditioned in PBS with Proclin™ 950.


Volume: 0.1 mg

Preparation: Dissolving contents of tube in 200 µL of distilled water yields an antibody concentration of 500 µg/mL.

Storage: Within 2 weeks at 4°C after dissolution.
For long-term storage, add an equal amount of glycerol and store at -20°C.

Note: This product should be used for research use only. Cannot be used for treatment and diagnosis purposes.
When handling it, wear a lab coat, protective glasses, a mask and gloves.

Example of use: Western Blotting

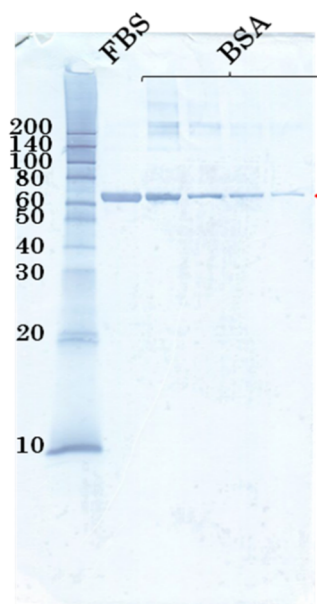

Recommended antibody concentration: 0.5-1 µg/mL

Sample: FBS, BSA (0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 µg/lane)

- 1) Block membrane with PBS containing 10% rabbit serum.
Incubate for 1 hour at room temperature.
- 2) Use the antibody adjusted to 1 µg/mL in PBS with 10% rabbit serum containing 0.05% Tween 20.
Incubate for 1 hour at room temperature.
- 3) Use Streptavidin-peroxidase.
Incubate for 1 hour at room temperature.
- 4) A band is detected with TMB at the position of molecular weight that matches BSA.

Institute of Tokyo Environmental Allergy
Hakusan NT Building, 1-33-18 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo
Tel: +81-3-3526-2031 Fax: +81-3-3526-2032

ITEA Director: _____ XXXXX

Quality Assurance: _____ XXXXX

Date of issue: mm dd, yyyy